

Xiaomi Oclean X Pro Electric Toothbrush

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Xiaomi Oclean X Pro Electric Toothbrush Manual HU v1.0 - 1. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Első használatoknál viszketést érezhet, vagy enyhe vérzést tapasztalhat, ez normális jelenség. Ez azért van így, mert az íny nincs felkészülve erre a hatékony tisztítást
- Ez a tünet általában 1-2 héten belül elmúlik. Amennyiben a tünetek nem múlnak el, fejezze be a fogkefe használatát és konzultáljon fogorvosával.
- Azok a felhasználók, akik fogászati kezelés, szájsebészeti eljárás alatt állnak, vagy implantátumot viselnek, csak fogorvos felügyelete alatt használják a fogkefét.
- Azok, akik érzékeny, szuvas foggal rendelkeznek vegyék fel a kapcsolatot fogorvossal a termék használatba vétele előtt.
- A Xiaomi Oclean X Pro termék minden biztonsági előírásnak megfelel az elektromágneses készülékekkel kapcsolatban. A pészmekekkel és implantátumokkal kapcsolatban konzultáljon orvosával a termék használata előtt.
- Ez a termék csak a fogak, az íny és a nyelv tisztítására használható. Ne használja ettől eltérő célokra. Amennyiben kellemetlenséget, vagy fájdalmat érez, fejezze be a termék használatát és konzultáljon orvosával.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne merítse a töltő dokkolót vízbe vagy más folyadékba.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzeselek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő dokkoló sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a fogkefe megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a fogkefét tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készülék használatát 12 éves kor felett javasoljuk.
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék

használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.

- Nem javasolt a termék használata olyan személyek esetén, akik szájbetegséggel rendelkeznek, laza a foguk vagy az ínyük, illetve fogínyvérzésük van.
-
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a fogkefe felmelegedhet. Ez normális jelenség.

A fogkefe tisztítása

- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
- Ne használjon kemikáliákat, vagy maró anyagokat tartalmazó tisztítószeret, mert károsíthatják a burkolatát.
- A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.

Használati tippek

- Ne ossza meg másokkal a fogkefe használatát.
- Ne tekerje a kábelt a töltő dokkoló köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat a töltő dokkolóra töltés közben, miközben az tápegységhez van csatlakoztatva.

JELLEMZŐK

Modell:	Oclean X Pro
Bluetooth:	4.2 BLE
Motor teljesítmény:	4200 rpm (max), 220 gf.com (max)
Üzem módok:	Tisztítás, Fehérítés, Masszázs, Érzékeny
Töltési idő:	Kb. 2 óra
Akkumulátor:	800 mAh
Üzemidő:	40 nap -1 fokozaton, 20 nap – 32 fokozaton
IP vízállósági osztály:	IPX7 a fogkefe, IPX5 a töltő esetén
Töltés:	Indukciós
Töltő dokkoló bemenet:	5V=1A
Súly:	99g

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Fogkefe
- 1 db. kefefej
- 2 funkciós töltő bölcső
- USB kábel
- Felhasználói kézikönyv
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)

Address: #32G, Building 3, Dachong, Business Center (west of Tonggu Road and north of Shennan Avenue) Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Schenzen

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelési jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.




IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu

Xiaomi Oclean X Pro Electric Toothbrush Manual HU v1.0 - 4. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

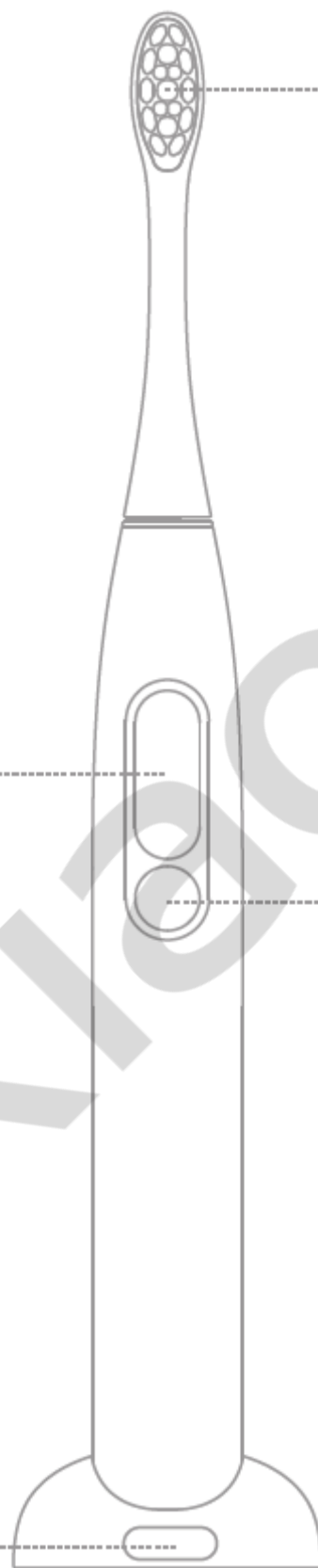

Kefefej

A kefefej eltávolításakor azt mindig függőlegesen húzza fel vagy helyezze fel! Ne forgassa jobbra-balra!

A kefefejet ajánlott 2-3 havonta cserélni-

Érintő kijelző

Fel/le és jobbra/balra végzett műveletek támogatása. A kijelzőt csak ujjbeggyel érintse.

Be/ki/szünet

A készülék bekapcsolása után működés közben a gomb megnyomása szünetelteti a működést; 15 mp-en belüli újra megnyomása újra elindítja a működést. 15 mp eltelte után a készülék alvó módba kapcsol.

2-az-1-ben

Tartó és töltő

KEZDETI LÉPÉSEK

Első használat


A bekapcsoláshoz nyomja meg a Be/kikapcsoló gombot. A Bluetooth funkció bekapcsol és készenléti módban.

Tisztítási terv

A készülék az alap üzemmódot az alap tisztítási terv alapján állítja be, ami 2 perc, ha nincs beállítva egyedi tisztítási terv az alkalmazásban. 30 másodpercenként egy vibrálás lesz tapasztalható, ami jelzi a felhasználó számára a terület váltását. A fogkefe 2 perc után automatikusan leáll.

Töltés

Töltés előtt törölje szárazra a fogkefét. Figyelje az akkumulátor energiaszintjét és csak alacsony energiaszint esetén töltsen az akkumulátort. Kerülje a túltöltést és a gyakori töltést.

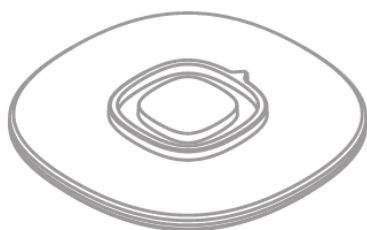

Öntapadós fal mágnes
(Helyezze a falra)

+




=



Talp
Helyezze sík felületre töltéshez.
Helyezze függőlegesen a
mágneses fal tartóra, ha
tartóként használja

Tartó talp
2-az-1-ben funkció

Megjegyzés:

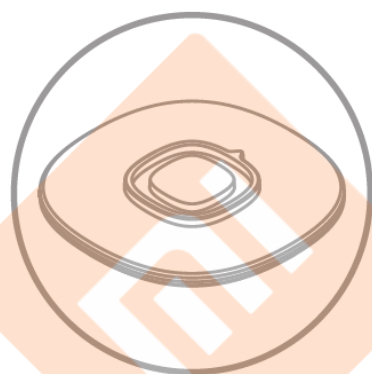

Ha falra helyezi a tartót ügyeljen rá, hogy az öntapadós tartóban lévő háromszög alakú rész felfelé nézzen.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Első használat

A bekapcsoláshoz nyomja meg a Be/kikapcsoló gombot. A Bluetooth funkció bekapcsol és bekapcsolva marad. Az Oclean alkalmazás telepítése után kövesse a megjelenő utasításokat a csatlakozás befejezéséhez.

Alkalmazás telepítése és beállítások

Az alkalmazás segítségével beállíthatja a fogkefe egyedi működését: automatikus tisztítás, fogfehérítés, és ínymasszázs egy használat során. Nem szükséges minden használat után csatlakoznia az alkalmazáshoz. Elegendő néhány naponta szinkronizálnia az adatokat.


Tisztítási előzmények ellenőrzése az alkalmazásban

Az alkalmazáshoz történő csatlakoztatás után, az alkalmazás le tudja tölteni a fogkefében tárolt adatokat. A korlátozott lehetőségek miatt a fogkefe 7 napig tárolja az adatokat.


Üzem mód beállítások

Lépjen be az üzemmód-beállítási menüpontba a kijelzőn fel-le húzással. Minden üzemmód (Tisztítás - Cleaning, Fehérítés – Whitening és Masszázs – Massage) erőssége 32 szinten állítható. Miután megváltoztatta a beállításokat, az automatikusan eltárolódik a memóriában.


Az erősség beállítása: a kijelzőn fel-le húzással az értékek 1 szinttel állíthatók, a kijelző oldalán fel-le húzással a szint 5 értékkel állítható.

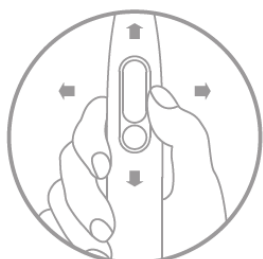

Fel/le/jobbra/balra húzás

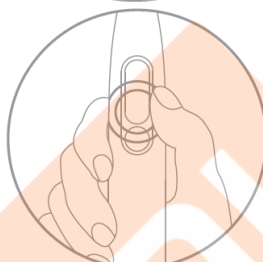

Hosszú érintés a kijelzőn vagy egy nyomás a bekapcsoló gombon a beállítás tárolásához.

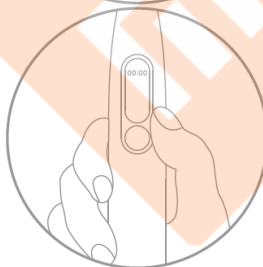

Idő beállítás

Csatlakoztassa fogkefét az alkalmazáshoz az adatok szinkronizálásához. Ezt követően a fogkefe automatikusan frissíti a helyi időt.

Közvetlen használat az alkalmazás nélkül

A fogkefét az alkalmazáshoz történő csatlakozás nélkül is használhatja az érintőkijelző és a Be/kikapcsoló gomb segítségével.

Fogmosási terv és az alkalmazás beállítása

Az alkalmazásban kiválaszthatja vagy beállíthatja a fogmosási tervet. Az alkalmazáson keresztül frissítheti a fogkefe szotverét a jobb teljesítmény érdekében.

TÖLTÉS

Az akkumulátor töltése

Vegye le a fogkefét a fali tartóról és csatlakoztassa a mobiltelefon töltőhöz. Amikor a fogkefe alját a töltő aljzatra helyezi az automatikusan beilleszti magát. A kijelzőn megjelenik az energiaszint töltés közben. A teljes töltéshez kb 2 óra szükséges. Javasolt töltő adapter (nem mellékelte), 5V/1A, 5V/2A.


Kevés energia jelzés

Ha az energia szint 20% alá csökken az akkumulátor jelzése gyakran jelenik meg a kijelzőn. A fogkefét tölteni kell. Ha az energiaszint 1% alá csökken a motor vibrálása jelzi és a kijelző kikapcsol.

Javaslatok a töltéshez

A fogkefe gyorstöltési funkcióval rendelkezik. Javasolt, hogy csak akkor helyezze a töltő aljzatra, ha feltétlenül szükséges. Ne helyezze a fogkefét hosszú ideig töltőre, mert az idő előtt tönkre teheti az akkumulátort és így a felhasználói élmény csökken.

JAVASOLT POZÍCIÓK A KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEKRE

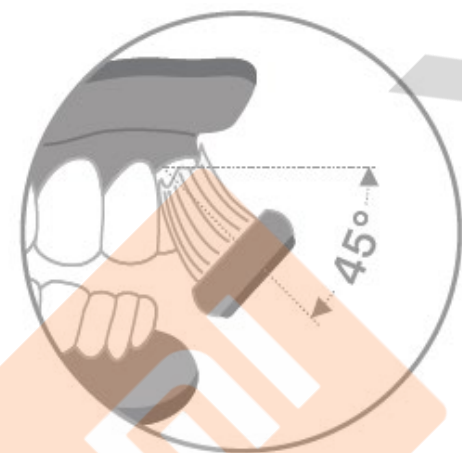

Tartsa a sortéket 45° szögben az ínyhez képest. Nem szükséges a sorték fel/le mozgatása.




Tartsa a fogkefe nyelét és mozgassa lassan körkörös mozdulatokkal. Ne nyomja erősen.



Öblítse el tiszta vízzel használat után.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

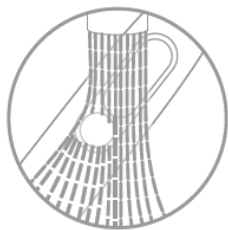

Kefefej és nyél tisztítása

Öblítse el tiszta vízzel minden használat után és hagyja megszáradni. Ne húzza ki a sörtéket.



A töltő tisztítása

Tisztítsa meg a koszos részeket egy puha ruhával. Tisztítás előtt húzza ki a fali aljzatból és csak teljes száradás után csatlakoztassa újra.



A nyél aljának tisztítása

Mindig tartsa tisztán és szárazon a nyél alját, mielőtt azt a töltőre helyezi. Tisztítsa meg a koszos részeket egy puha ruhával.

Xiaomi

