

Xiaomi Mi Electric Toothbrush T500

Elektromos fogkefe

Xiaomi Mi Electric Toothbrush T500 Manual HU v1.0 - 1. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Első használatoknál viszketést érezhet, vagy enyhe vérzést tapasztalhat, ez normális jelenség. Ez azért van így, mert az íny nincs felkészülve erre a hatékony tisztítást
- A javasolt üzemmódja a fogkefének a ♥ KEDVENC. Ez a tünet általában 1-2 héten belül elmúlik. Amennyiben a tünetek nem múlnak el, fejezze be a fogkefe használatát és konzultáljon fogorvosával.
- Azok a felhasználók, akik fogászati kezelés, szájsebészeti eljárás alatt állnak, vagy implantátumot viselnek, csak fogorvos felügyelete alatt használják a fogkefét.
- A Mi Electric Toothbrush T500 termék minden biztonsági előírásnak megfelel az elektromágneses készülékekkel kapcsolatban. A pészmekekkel és implantátumokkal kapcsolatban konzultáljon orvosával a termék használata előtt.
- Ez a termék csak a fogak, az íny és a nyelv tisztítására használható. Ne használja ettől eltérő célokra. Amennyiben kellemetlenséget, vagy fájdalmat érez, fejezze be a termék használatát és konzultáljon orvosával.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne merítse a töltő dokkolót vízbe vagy más folyadékba.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő dokkoló sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a fogkefe megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a fogkefét tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készülék használatát 8 éves kor felett javasoljuk.

Xiaomi Mi Electric Toothbrush T500 Manual HU v1.0 - 2. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a fogkefe felmelegedhet. Ez normális jelenség.

A fogkefe tisztítása

- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
- Ne használjon kemikáliákat, vagy maró anyagokat tartalmazó tisztítószer, mert károsíthatják a lámpa burkolatát.
- A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.

Használati tippek

- Ne ossza meg másokkal a fogkefe használatát.
- Ne tekerje a kábelt a töltő dokkoló köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat a töltő dokkolóra töltés közben, miközben az tápegységhez van csatlakoztatva.

JELLEMZŐK

Modell:	MES601
Névleges áramerősség:	3.7V=0.55A
Névleges teljesítmény:	2W
Töltési idő:	Kb. 12 óra
Akkumulátor:	700 mAh
IP vízállósági osztály:	IPX7
Bluetooth:	BT 4.0
Frekvencia:	2402-2480 MHz
Maximális RF kimenet:	0 dBm
Töltés:	Indukciós
Töltő dokkoló bemenet:	5V=0.5A
Kefefej mérete:	24,6x24,6x85,0 mm
Nyel mérete:	28,1x28,2x187,5mm

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Fogkefe
- Csatlakozás védőburkolat
- Színezett gyűrűk
- Töltőállomás
- Kefefej
- Kefefej védőburkolat
- Felhasználói kézikönyv
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Sococas (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)

Address: Room 2018, Block B, Floor 2, Ruifeng Business Center, No. 22 Guimiao Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelési jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőség tanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2020 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.




IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu

Xiaomi Mi Electric Toothbrush T500 Manual HU v1.0 - 4. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

KEZELŐSZERVEK

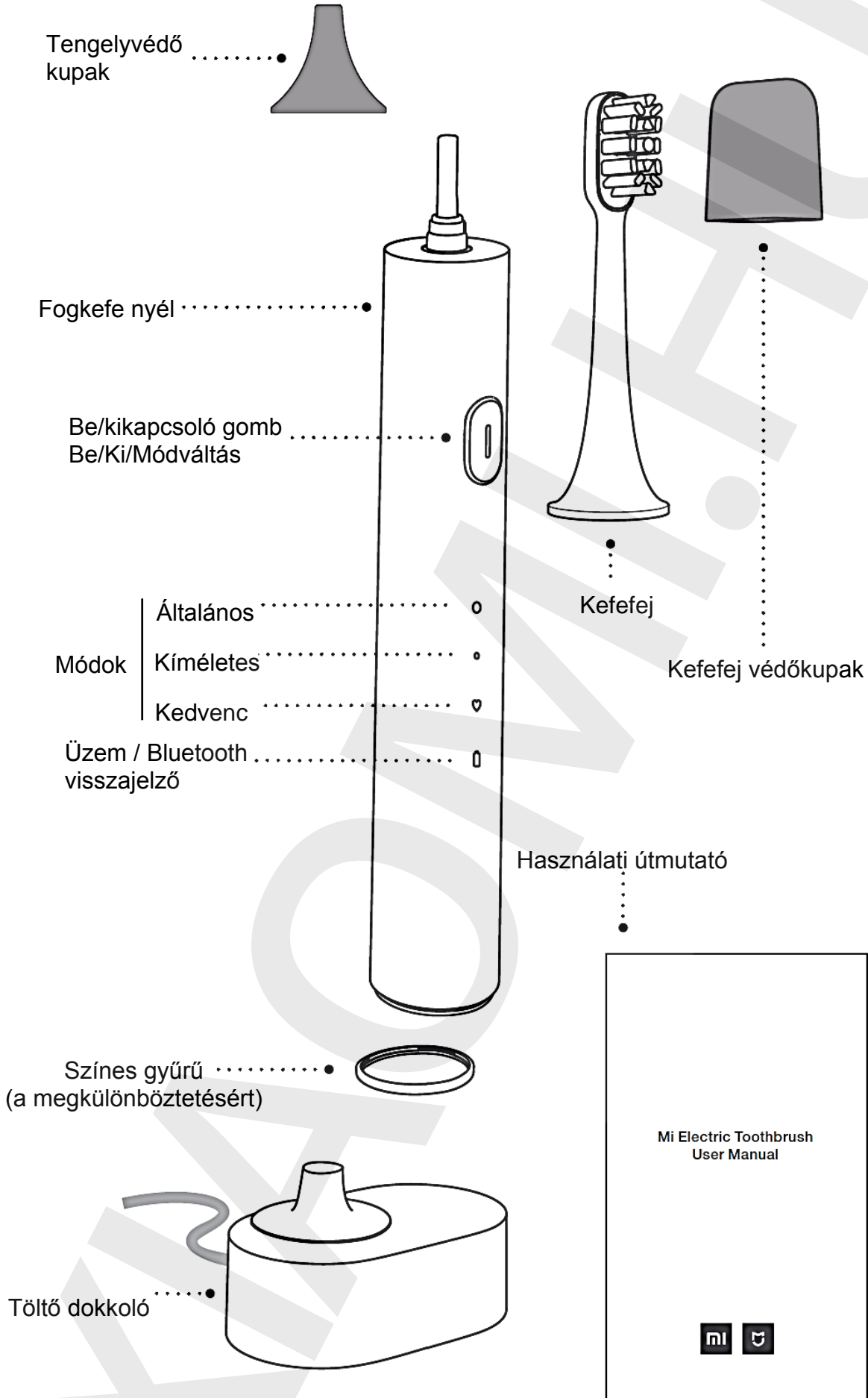


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Tipp:

- *Első használatoknál viszketést érezhet, vagy enyhe vérzést tapasztalhat, ez normális jelenség. Ez azért van így, mert az íny nincs felkészülve erre a hatékony tisztítást*
- *A javasolt üzemmódja a fogkefének a ♥ KEDVENC. Ez a tünet általában 1-2 héten belül elmúlik. Amennyiben a tünetek nem múlnak el, fejezze be a fogkefe használatát és konzultáljon fogorvosával.*

a) Kefefej felhelyezése

Erősítse a kefefejet a fogkefe nyeléhez és győződjön meg róla, hogy egy kis rés van a két alkatrész között. Ez a rés biztosítja, hogy a kefefej ne sűrűljon a fogkefe nyeléhez a nagy frekvenciájú rezgés közben, így a motor sokkal erősebben üzemelhet.

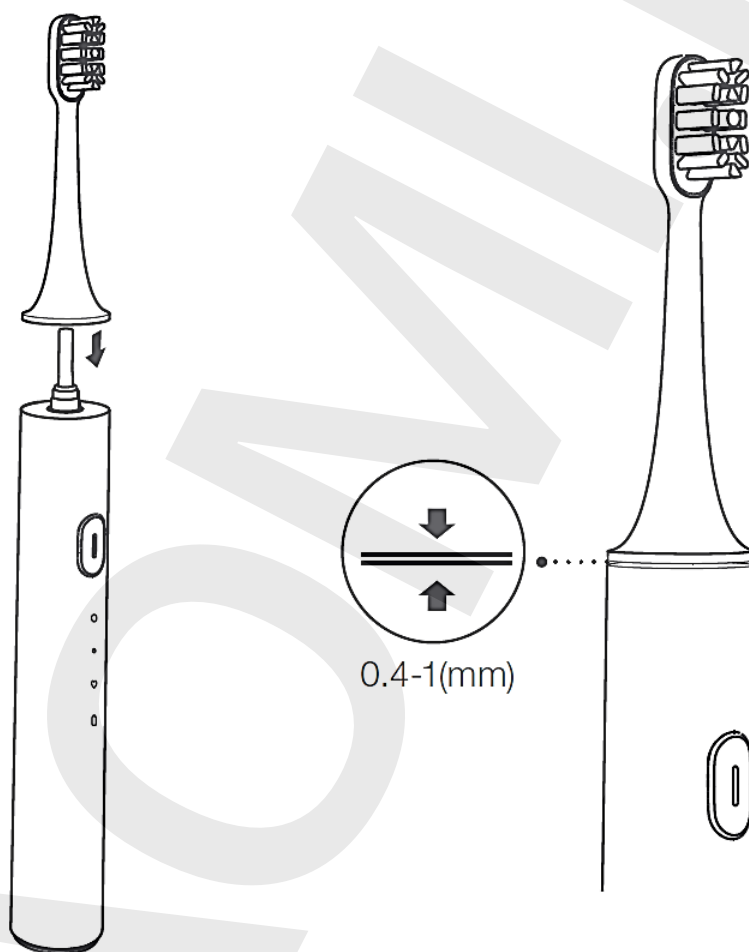

b) A színes gyűrű felhelyezése és cseréje

Cserélje ki a színes gyűrűt a preferenciája szerint.


A gyűrű eltávolítása: fogja a fogkefe nyelét a bal kezével, támassza meg a markolatot a bal hüvelykujjával, nyomjon ellent a készülék alján található lyuknak a jobb mutatóujjával, a jobb hüvelykujjának körmével a gyűrű alá tud nyúlni, nyomja meg felfelé a gyűrűt egy kis erővel és távolítsa el azt.

A színes gyűrű felhelyezése: tartsa a gyűrűt a csatlakozással lefelé ott, ahol a nyél három csatlakozási pontjával stimmel, nyomja meg a gyűrűt lefelé a felpattintáshoz.

Xiaomi Mi Electric Toothbrush T500 Manual HU v1.0 - 6. oldal


A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

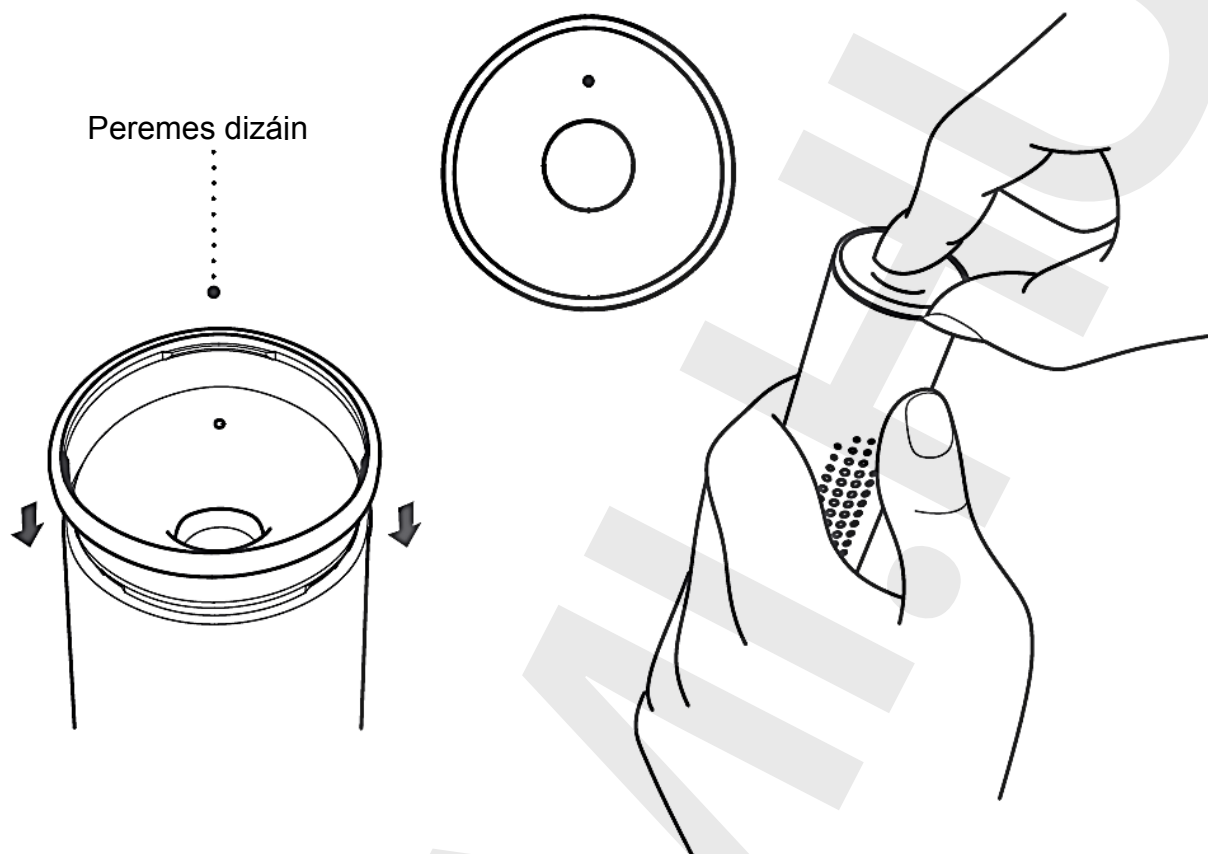


c) Fogkrém kipréselése

Nedvesítse meg a kefefejet és préseljen rá a fejre megfelelő mennyiségű fogkrémet.

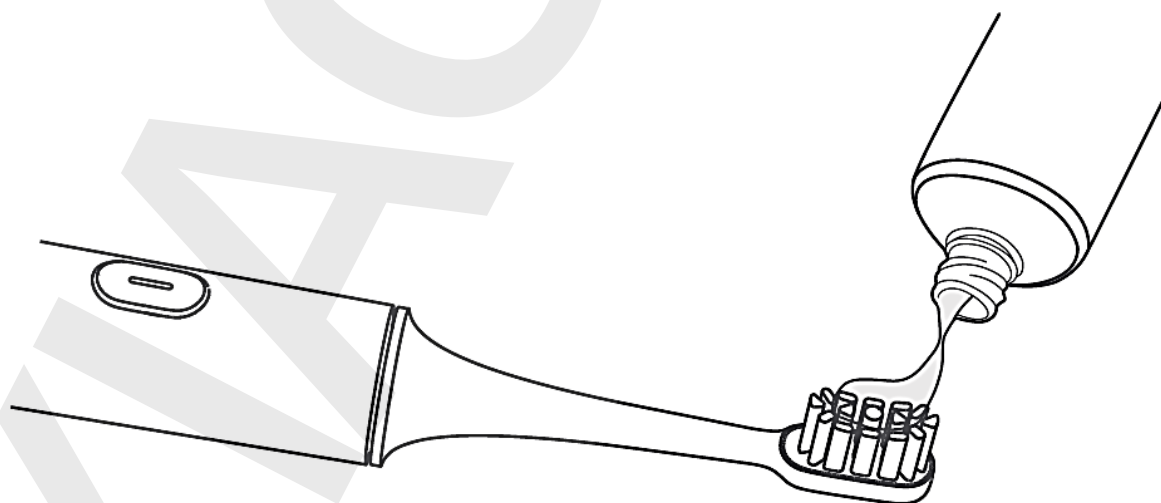



d) Üzem mód kiválasztása

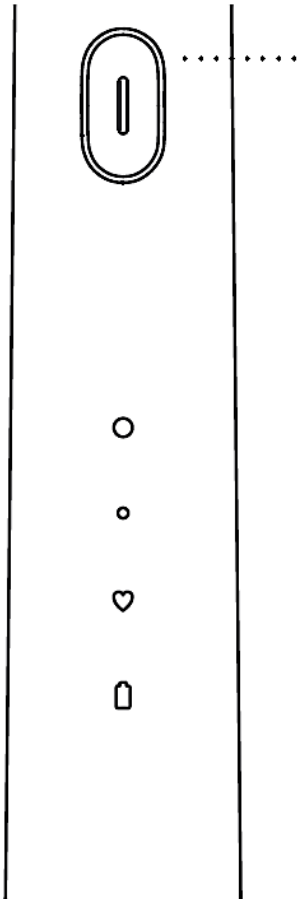

- Be/Ki/Módváltás
- Bekapcsolás: nyomja meg a gombot a bekapcsoláshoz
- Módváltás: mikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a gombot a módváltáshoz
- Szünet: tartsa nyomva a gombot 1 másodpercig a működés szüneteltetéséhez. A készülék automatikusan kikapcsol, miután 30 másodperc elteltével sincs aktivitás.
- Kikapcsolás: mikor a készülék be van kapcsolva, váltson a ♥ KEDVENC üzemmódra, majd még egyszer megnyomva a gombot a készülék kikapcsol.
- Nem várt es speciális esetekben nyomja meg és tartsa nyomva a gombot 12 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.


e) A fogak egészséges tisztítása

- Lassan mozgassa a fogkefét, miközben 45°-os szöget tart a fogkefe feje és az íny és a fognyak vonala között.
- Használhatja a Be/Ki gombot az üzemmód váltásra fogmosás közben is.
- Fogmosás közben a fogkefe 30 másodpercenként egy pillanatra megáll, emlékeztetve Önt arra, hogy váltson fogmosási pozíciót.
- Amennyiben nem szünetelteti az üzemelést, a fogkefe kikapcsol, miután a fogmosási ciklus lejárt (a ciklus időtartam az alkalmazásból beállítható).
- A fogkefe túlzott nyomás elleni védelemmel van ellátva, ami folyamatosan figyeli a nyomás erősségét. Ha túl erős nyomást gyakorol fogmosás közben az energiaszint jelző vörösen villogni fog és a fogkefe visszafogja a rezgés erősségét.
- A fogkefe három módban használható:
Alap mód: napi rendszeres fogmosásához ajánlott
Gyengéd mód: érzékeny fogak esetén
Kedvenc mód: alapbeállítás szerint 2 perces kezdő mód, ennek értékei az alkalmazáson keresztül megváltoztathatóak.

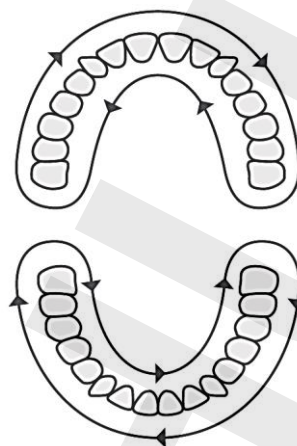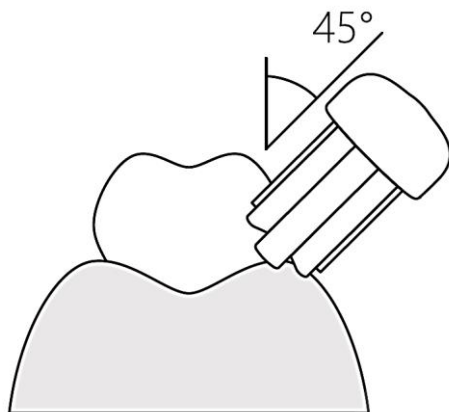


f) A kefefej tisztítása

- Fogmosás után mossa el folyó víz alatt a kefefejet.
- Tisztítás után helyezze fel a kefefej védő kupakot, hogy a fejet tisztán és higiénikusan tartsa.

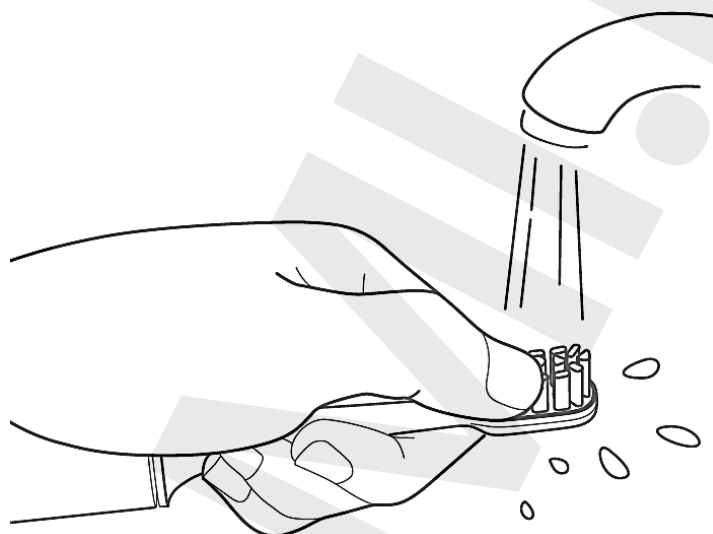

FDA élelmiszer és károsanyag-biztonsági teszt


Az akrilnitril kopolimereket a U.S.F.D.A C.F.R.21. része, a műgyanta / műanyagok megfelelnek az S.F.D.A.C.F.R.21. Part 177.1500-nak.

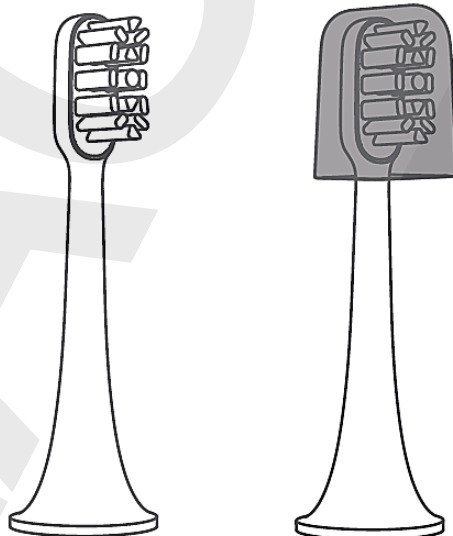

* A kefejek 3 havonta történő cserélését javasoljuk,

g) A készülék időszakos töltése

- Miután a töltő dokkolót áram alá helyezte, a fogkefe visszajelzője különböző effekteket jelenít meg a töltöttségi fokozat függvényében.
- 100-60% - Zöldeskék 60-20% - Narancssárga 20-10% - Vörös >10% - Vörösen villog
- A teljes töltés több, mint 12 órát vesz igénybe, miután az akku teljesen lemerült (az akku töltöttség visszajelző pirosan villog).
- Ha a Bluetooth kapcsolat sikeres a töltés alatt, a töltés / Bluetooth visszajelző háromszor villog és a Bluetooth kapcsolat fennmarad. Miután a Bluetooth kapcsolat megszűnt, a töltési visszajelző effektus visszaállításra kerül.

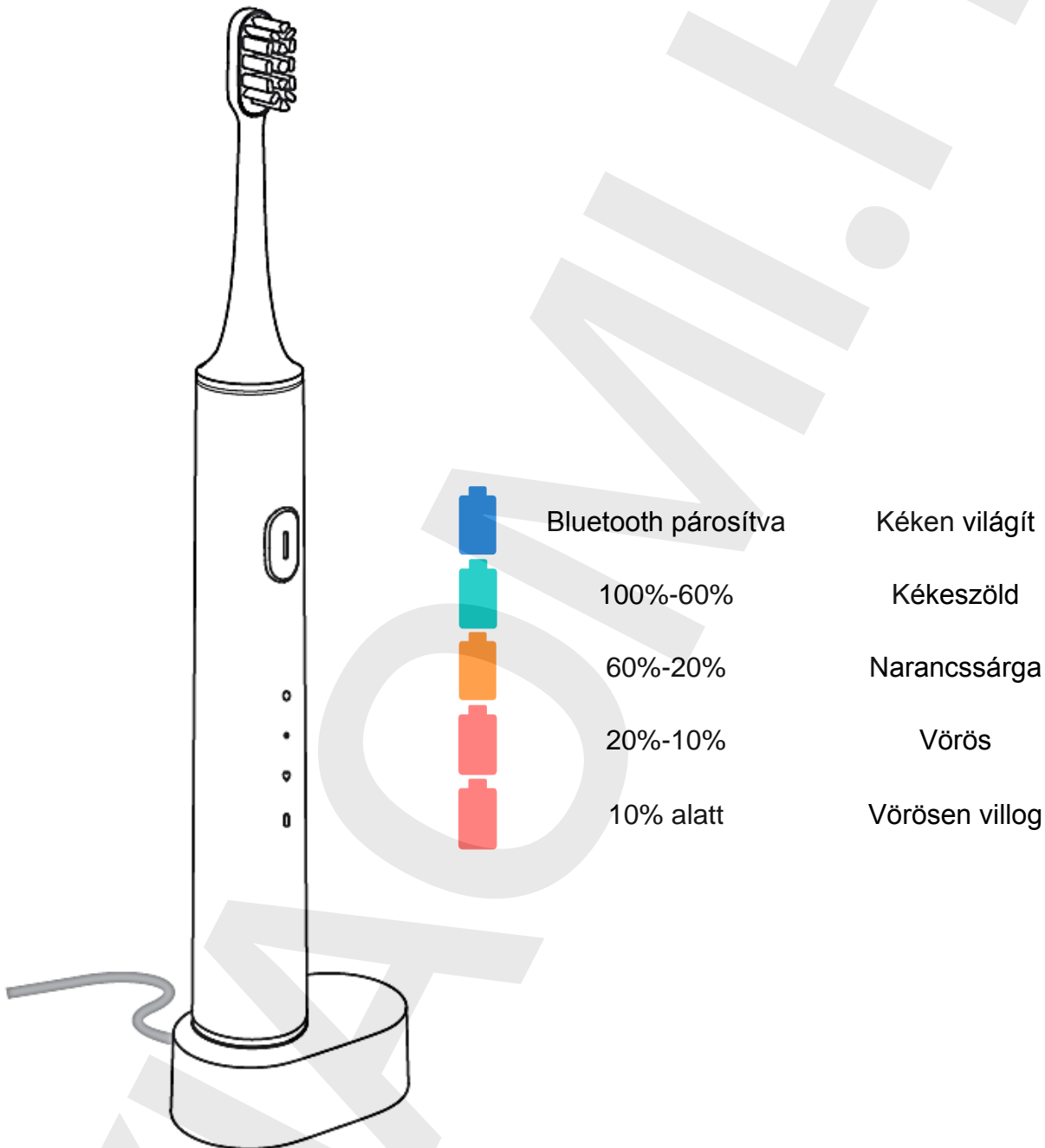

h) A fogkefe okostelefonról vezérelhető a Mi Home applikáció segítségével. Töltse le és telepítse a Mi Home alkalmazást.



Mi Home



Nyissa meg az alkalmazást. Régióknak állítsa be Európát, a nyelvet pedig NE automatára állítsa, hanem ANGOL nyelvre.

- Koppintson az alkalmazásban a „Devices” (Eszközök menüpontra és a + gomb segítségével adjon hozzá új eszközt. Jelölje ki a Mi Electric Toothbrush T500 terméket. Az applikáció automatikusan letölti a beépülő modult ehhez az eszközhöz (internetkapcsolat szükséges).
- Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig a Be/Ki gombot a fogkefén, a Bluetooth visszajelzés háromszor villog, majd folyamatosan világít, majd kialszik, ez jelzi, hogy a csatlakozás sikeres.
- Kövesse a további utasításokat a kijelzőn.

Megjegyzés:


A GPS vevőnek aktívnak kell lennie több mobiltelefon típus esetén, mikor a lámpát keresi Wi-Fi-n.

A fogkefe nem működik a Bluetooth kapcsolat közben és a Bluetooth nem csatlakoztatható a fogkefe használata közben


Regisztráljon Mi Fiókot, majd lépjen be.
A „Devices” részben koppintson a fogkefére.



Tartsa közel a fogkefét az okostelefonhoz.

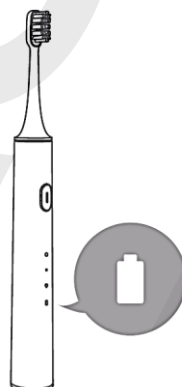

Húzza le az oldalt az ujjával az adatokszinkronhoz

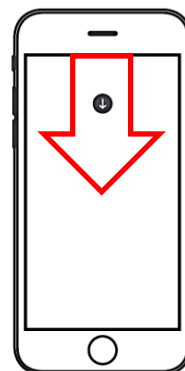

Adatszinkronizáció sikeres.

Váltson a ♥ KEDVENC üzemmódra, a fogmosási adatok és az analízis megjelenítésre kerül a kijelzőn. Itt megtekintheti a kefefej visszalévő élettartamát is.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készüléket nem lehet bekapcsolni	A készülék töltés alatt van. A készülék éppen Bluetooth kapcsolatban van. Az akkumulátor lemerült.	Vegye le a töltőről. Kapcsolja ki a Bluetooth-t a telefonján Helyezze a töltőre a fogkefét.
A kefefejet nem lehet feltenni a tengelyre	A fogkefébe idegen tárgy szorult. Fogkrém vagy más anyag ráragadt a tengelyre. A fogkefe nem eredeti Mi Toothbrush Head termék.	Távolítsa el az idegen tárgyat. Tisztítsa meg a tengelyt Használjon eredeti tartozékot.
Az energiafelhasználás nagy és a készüléket sokszor kell tölteni	A készülék már régen Bluetooth kapcsolódási üzemmódban van. A készüléket nagyon gyakran használják.	Kapcsolja ki a Bluetooth-t ha nem használja a fogkefét. Helyezze a töltőre a fogkefét.
A kefefej vibrációja nem elegendő	A kefefej nincs megfelelően a helyén. Idegen tárgy szorult a markolat és a kefefej közé.	Helyezze vissza a kefefejet. Távolítsa el az idegen tárgyat és helyezze vissza a fejet.
Az alkalmazás nem tud csatlakozni a fogkeféhez	A Bluetooth a telefonon nincs engedélyezve. A fogkefe nincs megfelelő távolságban a telefontal. A fogkefe használat közben van.	Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonján. Helyezze közelebb a fogkefét Kapcsolja ki a fogkefét és csatlakozzon újra